



Elea-Alerts

Guía rápido de inicio

## Elea-Touch




El pulsador es un dispositivo inalámbrico que permite pedir ayuda mediante:

- Pulsación táctil sobre la superficie del pulsador.
- Activación con cordón.

Funciona con pila o con alimentación externa.

## Elea-Light

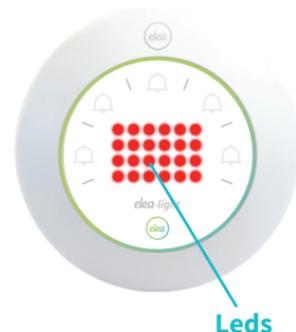

La baliza es un dispositivo inalámbrico diseñado para avisar de forma acústica y luminosa de múltiples eventos: caídas, llamada de timbre, teléfono, telefonillo, emergencias, apertura de puertas, etc.

Dispone de Leds de alta intensidad de hasta 6 colores que captan la atención.

Dispone también de un zumbador para la señal acústica de 95 decibelios.

## Instalación Elea-Touch (I)

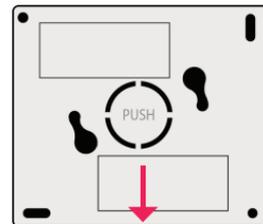


Figura 1.

**Paso 1:** Retirar la parte trasera del pulsador por la pestaña inferior.



Figura 2.

**Paso 2:** Una vez retirada la parte posterior, añadir la pila incluida como se muestra en la figura 2.

## Instalación Elea-Touch (II)

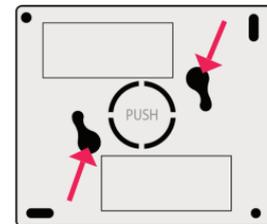


Figura 3.

**Paso 3:** Colocada la pila, se deberá atornillar la parte trasera del pulsador a la pared y volver a poner la parte frontal.

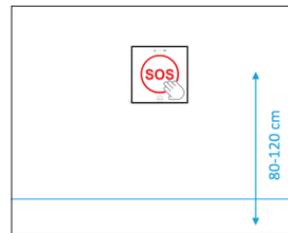


Figura 4.

**Paso 4:** El pulsador deberá de estar colocado a una altura del suelo entre 80 y 120 cm.

## Instalación Elea-Light (I)

Para que los avisos sean efectivos, Elea-Light deberá instalarse en ubicaciones de paso frecuente. Podrá instalarse en una zona fija mediante atornillado a pared o techo, o también podrá colocarse en superficies como mesas o muebles.

Para la instalación en pared:

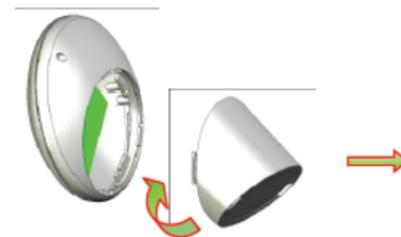


Figura 5.

**Paso 1:** desmontar el pie de la baliza girando la base 45°, en cualquier sentido, y tirar suavemente hacia fuera, tal y como se muestra en la figura 5.

## Instalación Elea-Light (II)

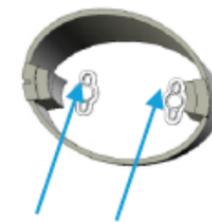


Figura 6.

**Paso 2:** atornillar la base a la pared, en una zona de fácil visualización, con 2 tornillos de 5mm.



Figura 7.

**Paso 3:** una vez atornillada la base a la pared, volver a enroscar la baliza girándola 45°.

## Funcionamiento Elea-Alerts



Para la activación de la alarma hay que tocar la superficie de del pulsador o tirar del cordón.

La baliza, de forma inalámbrica, recibirá el aviso y emitirá una señal luminica y acústica.

Una vez enviada la señal, la baliza avisará a la persona que el aviso ha sido transmitido.

Para resetear la alarma una vez activada, pulsar la parte táctil durante 5 segundos seguidos


**Nota:** para la configuración de los avisos, ver información al dorso.

## Configuración app (I)



Para vincular el dispositivo a la aplicación, se deberá pulsar **CONECTAR** en la sección de **Dispositivos BLE**.

## Configuración app (II)

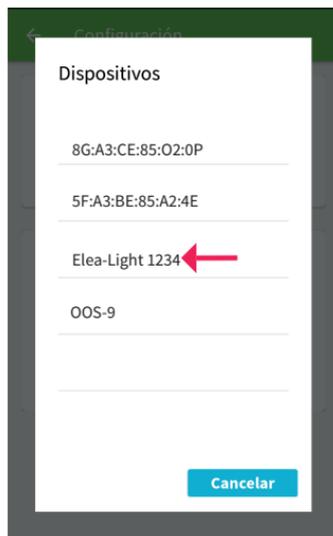

Una vez pulsado en **CONECTAR**, aparecerá una lista con todos los dispositivos disponibles para configurar. En nuestro caso, pulsaremos en **Elea-Light 1234**.

**Nota:** si por algún motivo no encuentra su dispositivo, presione **Cancelar** y vuelva a repetir el paso 1.

## Configuración app (III)



Seleccionado nuestro dispositivo, aparecerá el menú con todas las funciones.

Presione el botón **Asociar Dispositivo** para iniciar la vinculación.

**Nota:** si el indicador de conexión se encuentra de color rojo y los botones en tono gris, significa que no se ha conectado. Por favor, repita el paso anterior.


## Configuración app (IV)



Presionado el botón **Asociar Dispositivos**, podrá elegir el color con el que señalará el aviso.

Cuando pulse en el color, se mostrará el mensaje *accione dispositivo*. En ese momento, deberá activar el dispositivo manualmente. Ej: tirando del cordón del pulsador.

## Configuración app (V)

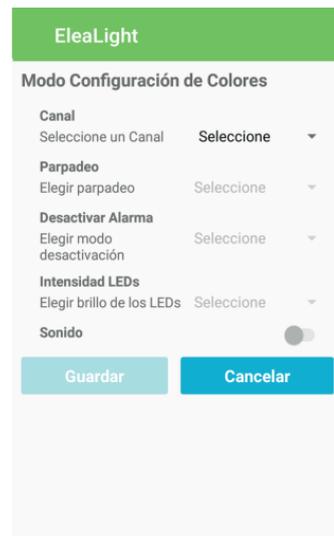

Una vez accionado el dispositivo, le devolverá al menú principal. Para configurar el comportamiento del color, presione en **Configurar Color Leds** y se encontrará con las siguientes opciones:

- **Canal:** permite seleccionar el color a configurar.
- **Parpadeo:** permite escoger la velocidad de parpadeo.
- **Desactivar Alarma:** entre automático y normal.
- **Intensidad LEDs:** permite escoger la potencia de proyección de la bombilla.
- **Sonido:** permite activar o desactivar los pitidos.

## Configuración app (VI)



Otras configuraciones:

- **Borrar Dispositivo:** permite borrar un dispositivo. Presionado el botón, deberá accionar el dispositivo a borrar y se eliminará automáticamente.
- **Valores de Fábrica:** borra todas las configuraciones previamente hechas.
- **Cambiar Nombre:** permite cambiar el nombre de un dispositivo.

**Nota:** la Ñ no es un caracter permitido en la opción de **Cambiar Nombre**.

### Más información

Puede obtener más información acerca de Elea Soluciones SL en <http://elea-soluciones.es>

### Soporte técnico

Para más información acerca de Elea-Alerts o para obtener soporte tanto de instalación como de funcionamiento, póngase en contacto a través de correo electrónico [soporte@elea-soluciones.es](mailto:soporte@elea-soluciones.es) o en el teléfono **911 294 285**.

*Innovamos en domótica pensando en ti*

